

仕 様

● 操作部本体

外形寸法	W175×H134×D48mm
重 量	600g(接続コード含まず)
電源/電流	AC100V / 1.0A
音声合成方式	MP3 (MPEG Audio Layer-3) 方式
音声語句	最大7種類×5ヶ国語
音声出力	0.5W 8Ω
言語表示部	LCD (128×128 dots)
本体付属リード線	表示器接続コード 20m スピーカー接続コード 20m スターター信号コード 10m
電源コード	1.8m


● 表示器

外形寸法	W251×H90×D48mm
重 量	720g(接続コード含まず)
電源/電流	AC100V / 1.0A
表示部	VFD (256×64 dots)
電源コード	1.8m

● スピーカー

外形寸法	W120×H120×D71mm
重 量	395g(接続コード含まず)
入カインピーダンス	8Ω

外観図

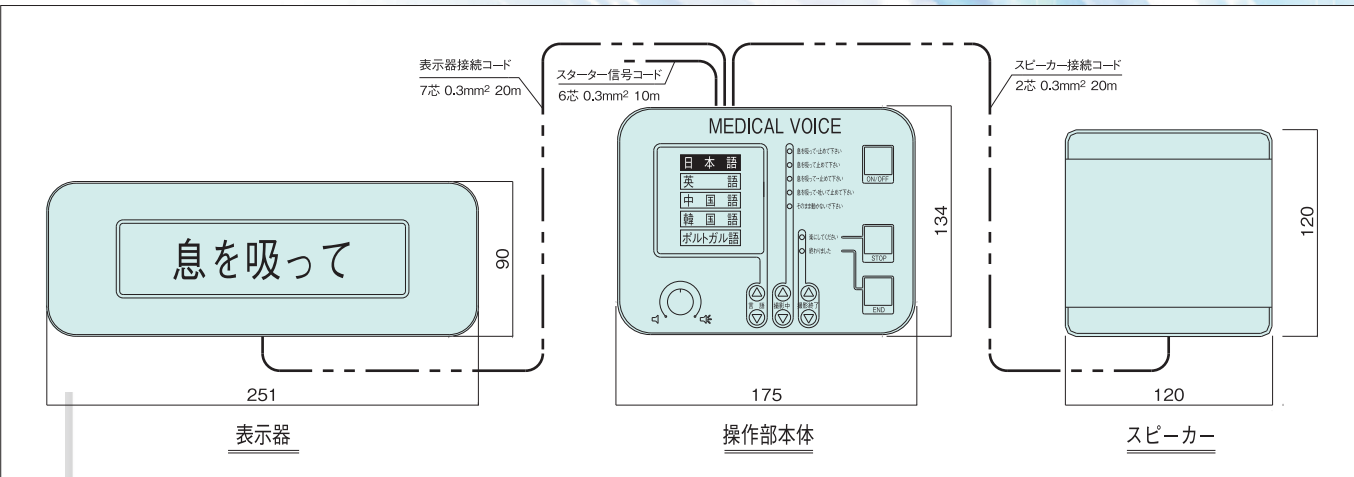

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
第一誠実ビル4階
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022
大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
SORA新大阪21ビル6階
電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323
松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階B号
電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地
電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671
金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号
東インター新喜ビル4F
電話 022-706-1582 FAX 022-287-3077
福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号
電話 092-518-1195 FAX 092-483-7513

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
第一誠実ビル4階
TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022
大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
SORA新大阪21ビル6階
TEL:06-6396-8327 FAX:06-6396-8323
松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階B号
TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444


名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地
TEL:052-449-2670 FAX:052-449-2671
金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165
TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号
東インター新喜ビル4F
TEL:022-706-1582 FAX:022-287-3077
福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号
TEL:092-518-1195 FAX:092-483-7513

メディカルボイス

MEDICAL VOICE

MV2009シリーズ

音声と表示で
撮影能率の向上をサポート

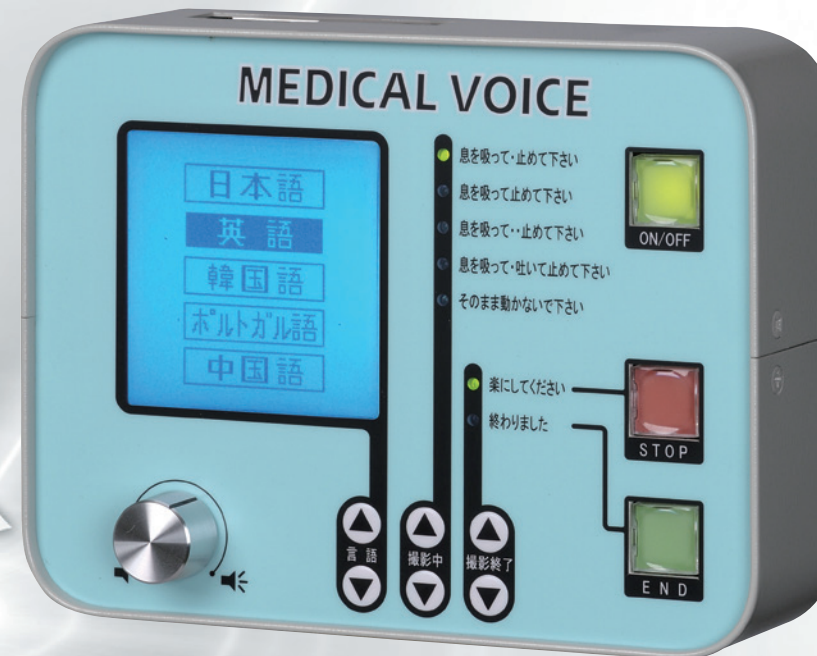

オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

メディカルボイス(音声発生装置)は、 X線一般撮影、検診車などの 注意などを女性の声で正確に

検査時に受診者に対し動作指示や 伝える音声装置です。

特長

Feature

- 1 選択された言語がひと目でわかる**
 操作部本体にあるLCD(液晶表示器)の表示により選択言語がひと目で確認できます。
- 2 音声の選択がカンタン**
 選択する音声はセレクトスイッチを押すと音声内容の文頭にあるLEDが点灯しますので容易に確認できます。
- 3 操作部本体と表示器は別電源**
 撮影画像に影響を及ぼすノイズの発生を極限まで抑える為、操作部本体と表示器は別電源としました。
- 4 音声は最大5ヶ国語まで対応可能**
 音声言語は、日本語・英語・中国語(北京語)・韓国語・ポルトガル語の中で組み合わせが自由にできます。
 ※弊社規格以外の言語も承りますのでご相談ください。

音声内容

Content

撮影中

- 息を吸って・止めてください。 ●息を吸って止めてください。 ●息を吸って・止めてください。
- 息を吸って・吐いて止めてください。 ●そのまま動かないでください。

撮影終了

- 楽にしてください。 ●終わりました。



●表示器

その他の特長

Others

- パネルスイッチの採用**
 操作部本体にパネルスイッチを採用し、パネル面の凹凸を極力無くし、操作性と視認性を向上させました。
- 大きな文字で、くっきりと表示**
 表示器に大型VFD(蛍光表示管)を採用し、大きな文字でくっきりと表示されるので患者さんからの視認性も大幅にアップ。
- 最大5ヶ国語**
 最大5ヶ国語の言語がインストール可能で、音声と文字表示で撮影能率の向上をサポート。

オプション

Option

- 言語変更**
 納入後の言語変更(他国語への変更や登録順序の変更)や言語の追加が可能です。
 (最大登録言語数は5ヶ国語までです。)
- 特注言語**
 弊社規格言語以外の外国語も承ります。

商品コード

Item Coad


商品コード	言語数
スタンダード仕様	
MV2009-1	1ヶ国語 ※1
MV2009-3	3ヶ国語 ※2
MV2009-5	5ヶ国語

※1：1ヶ国語仕様では『日本語』が登録されています。
 ※2：御注文時に日本語・英語・中国語(北京語)・韓国語・ポルトガル語から3言語お選びください。
 ※弊社の指定言語の中から登録言語と登録順序を自由に指定いただくこともできます。

商品内訳

Breakdown

- スタンダード仕様**
 ・操作部本体 ・表示器 ・スピーカー

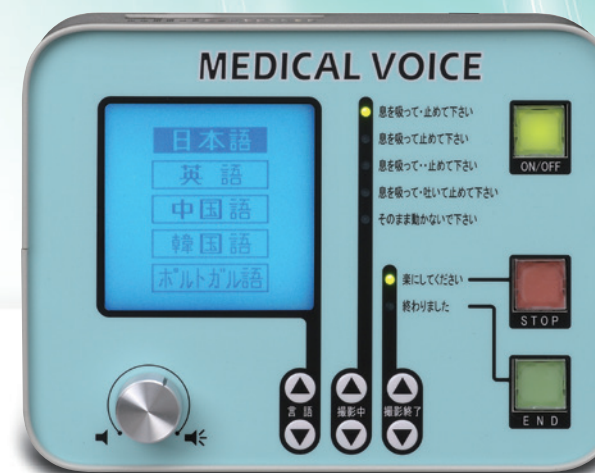

●操作部本体



●スピーカー